

A N A L Y S E N T E C H N I K

GPC-/SEC-Säulen & Zubehör **2024**

**Direkt vom
Hersteller**

ab sofort in
neuentwickelter Säulenhardware!

- MZ-Gel SD^{plus}
- MZ-Gel SD^{plus} LS
- MZ-Super FG

Entwicklung • Herstellung
Vertrieb • Beratung

HPLC-Säulen

- Neu + Refill
- umfangreiche Auswahl an Packungsmaterialien
- micro • analytisch • präparativ
- PerfectChrom • PerfectBond
- MZ-AquaPerfect • PerfectSil
- PerfectSil Target • Orbit

Vertriebspartner für:

- WATERS • GL-SCIENCES
- THERMO SCIENTIFIC • MERCK
- NOURYON/KROMASIL • TCI
- DAICEL/CHROMTECH • ES-IND.
- PERKIN-ELMER • AMT/HALO
- AVANTOR-ACE • SEPAX
- MACHEREY-NAGEL

MZ-PAH

- Trennung von PAK's

MZ-PBM

- Trennung von Pestiziden

MZ-Gel SD^{plus}

- GPC-Säulen Organisch Styrol-Divinylbenzol

MZ-Gel SD^{plus} LS

- Für die Lichtstreuungsdetektion

Zubehör

- IDEX H&S Ventile
- EXMIRE-Spritzen
- Spritzenfilter
- Vorsäulensysteme
- Kapillaren
- Verschraubungen uvm.



Online-Shop OPEN



Über uns...

Seit der Gründung im Jahre 1986 ist MZ-Analysentechnik GmbH aktiv auf dem Gebiet der GPC, SEC sowie HPLC. Dies betrifft sowohl Herstellung, Vertrieb, Beratung und Entwicklung von Trennsäulen und Bulkmaterialien. Dabei haben wir stets und konsequent das Ziel verfolgt, unseren Kunden optimale Lösungen für ihre spezifischen Trennprobleme zur Verfügung zu stellen - mit dem Fokus auf bestmögliche Qualität zu günstigen Konditionen.

Die stete Verfeinerung der Herstellungstechniken ermöglicht uns, die Qualität unserer eigenen Produkte beständig weiter zu verbessern. Besonders möchten wir Sie auf die folgenden Spezialitäten von MZ-Analysentechnik auf dem Gebiet der GPC hinweisen:

- ➔ **MZ-Gel SD_{plus} LS:** für die Detektion mittels Lichtstreuung.
- ➔ **MZ-Gel SD_{plus} 3 µm:** organische GPC-Säulen mit garantierter Bodenzahl > 100.000 m⁻¹
- ➔ **Narrow-bore GPC-Säulen** mit 4,6 mm Innendurchmesser sparen bis zu 70 % Elutionsmittel und schonen die Umwelt.
- ➔ **Micro-bore GPC-Säulen** mit 3 & 2 mm Innendurchmesser: für Spezialanwendungen.

Überzeugen Sie sich von der Qualität unsererer GPC-Säulen und profitieren Sie vom direkten Kontakt mit dem Hersteller. Wir halten einige sehr attraktive Angebote zum Kennen lernen für Sie bereit.


Ihr Team von MZ-Analysentechnik

MZ-Gel SD_{plus}

Allgemeine Informationen

- ➔ **MZ-Gel SD_{plus}** ist ein von MZ-Analysentechnik entwickeltes Hochleistungs-Styrol-/Divinylbenzol-Copolymer mit hohem Vernetzungsgrad
- ➔ Absolut sphärische Teilchenform mit sehr enger Teilchen- und Porengrößenverteilung
- ➔ Ab sofort wird das Material in neuentwickelter State-of-the-Art Säulenhardware mit garantierter Refill-Möglichkeit ausgeliefert.
- ➔ Besonders zuverlässig und langzeitstabil

MZ-Gel SD_{plus}: Langzeitstabilität

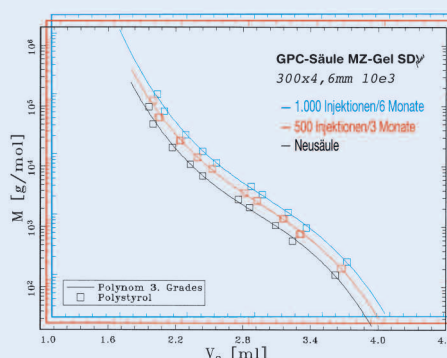

Technische Daten


MZ-Gel SD _{plus}	3 µm	5 µm	10 µm
Teilchenform	sphärisch	sphärisch	sphärisch
Porosität [Å]	50-10 ³ Å	50-10 ⁶ Å und linear	50-10 ⁶ Å und linear
Bodenzahl: min. garantiert [m ⁻¹]	100.000	60.000	50.000
Bodenzahl: typischer Bereich [m ⁻¹]	120.000	80.000	60.000
Druckstabilität [bar]	160	160	160
Druck per 30 cm [bar]*	40	25	15
max. Fluss Analytisch 8 mm ID	1,5 ml/min	1,5 ml/min	3 ml/min
max. Fluss Narrow-bore 4,6 mm ID	0,6 ml/min	0,6 ml/min	0,6 ml/min
max. Fluss Präparativ 20 mm ID		10 ml/min	20 ml/min
Arbeitstemperatur	bis 100 °C	bis 100 °C	bis 140 °C

* Angabe bezieht sich auf Säule 300 x 8 mm, Fluß 1 ml/min, Eluens THF

MZ-Gel SD_{plus}

Molekulargewichtsbereiche & Ausschlussgrenzen

Porosität	Molekulargewichtsbereich		Ausschlussgrenze
50 Å	<	2.000	3.000
100 Å	<	3.000	5.000
500 Å	<	20.000	20.000
10e3 Å	1.000 -	40.000	70.000
10e4 Å	4.000 -	500.000	700.000
10e5 Å	10.000 -	2.000.000	4.000.000
10e6 Å	200.000 -	10.000.000	> 10.000.000
Linear	1.000 -	1.000.000	> 2.000.000


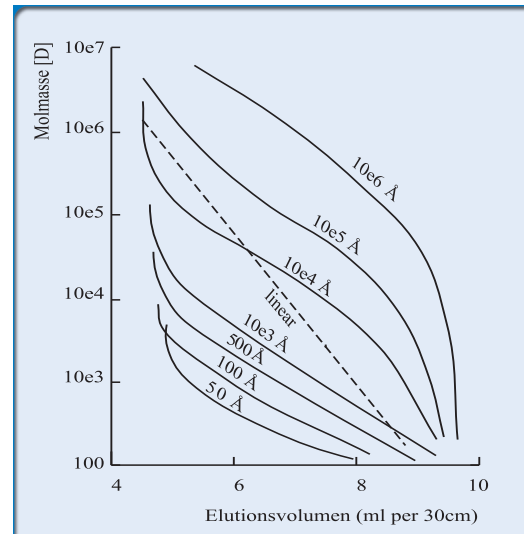


Lösungsmittelkompatibilität

MZ-Gel SD_{plus} GPC-Säulen werden standardmäßig in THF hergestellt, getestet und verschickt.

Selbstverständlich sind sie auf Wunsch auch in anderen gebräuchlichen Lösungsmitteln erhältlich. Bei der Umstellung des Lösungsmittels muss das Quellverhalten berücksichtigt werden.

GPC-Lösungsmittel können nach ihrem Quellverhalten in vier Gruppen von sehr stark bis schwach eingeteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Umstellungsmöglichkeiten:

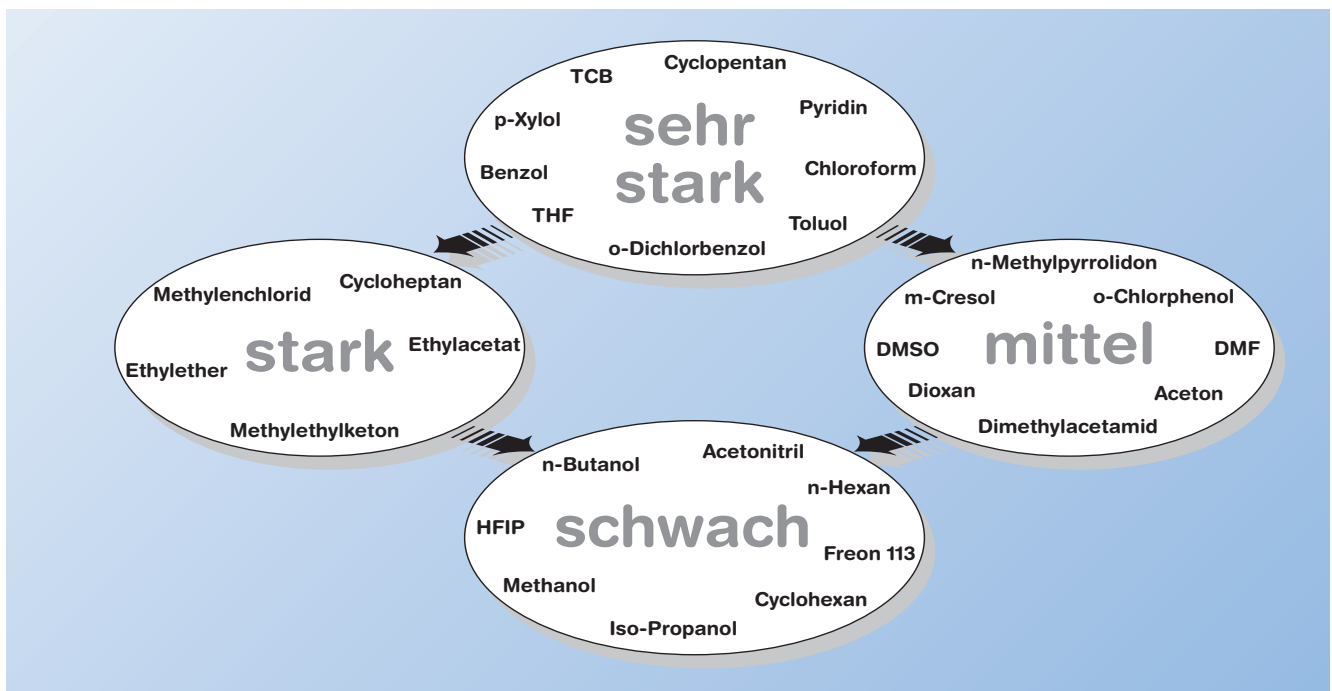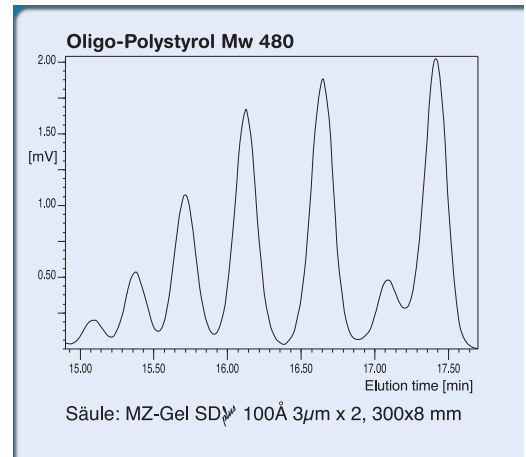

GPC-Lösungsmittel: Quellverhalten und Umstellungsmöglichkeiten

MZ-Gel SD^{plus} Preise und Bestellinformationen



Analytisch 8 mm ID			Preis/€	
Länge x ID	Korngröße	Porosität	Neu	Refill
300 x 8 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	1.223,--	1.101,--
	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.070,--	948,--
	5 µm	linear	1.162,--	1.040,--
	10 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	834,--	713,--
600 x 8 mm	10 µm	linear	950,--	828,--
	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.529,--	1.345,--
	5 µm	linear	1.754,--	1.572,--
	10 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.213,--	1.029,--
50 x 8 mm	10 µm	linear	1.374,--	1.190,--
	5 µm	alle Porositäten + linear	373,--	324,--
	10 µm	alle Porositäten + linear	373,--	324,--

Microbore				
250 x 3 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	734,--	613,--
40 x 3 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	256,--	196,--
250 x 2 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	734,--	613,--
40 x 2 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	256,--	196,--

Narrowbore 4,6 mm ID (sparen bis zu 70 % Lösungsmittel)				
300 x 4,6 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	1.223,--	1.101,--
	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	917,--	7945,--
	5 µm	linear	1.009,--	887,--
40 x 4,6 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	256,--	196,--
	5 µm	alle Porositäten + Linear	256,--	196,--
	10 µm	alle Porositäten + Linear	256,--	196,--

Materialcodes MZ-Gel SD^{plus}

Porosität	3 µm	5 µm	10 µm
50 Å	5553	5555	5530
100 Å	5013	5015	5010
500 Å	5053	5055	5050
1.000 Å	5303	5305	5300
10 ⁴ Å	-	5405	5400
10 ⁵ Å	-	5505	5500
10 ⁶ Å	-	5605	5600
Linear	-	5005	5000

Präparativ 20 mm ID				
300 x 20 mm	10 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	2.434,--	2.130,--
	10 µm	linear	2.754,--	2.450,--
50 x 20 mm	10 µm	alle Porositäten + Linear	594,--	417,--

i Bestellnummer

MZ	CODE	-	LEN	IDØ
4-stelliger Materialcode	Länge in mm		ID in 1/10 mm	

Beispiel:
 MZ-Gel SD^{plus} 100 Å 5 µm (5015);
 GPC-Säule 300 x 8,0 mm
 => Best.-Nr.: **MZ5015-300080**
 Details zum Refill-Service auf Anfrage



MZ-Gel SD^{plus} LS - für die Detektion mittels Lichtstreuung

Die Detektion mittels moderner Laser-Lichtstreuendetektoren ermöglicht die direkte Bestimmung von Molekulargewichten der untersuchten Polymere. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit und Störanfälligkeit stellt diese Methode besonders hohe Anforderungen an die gesamte Messprozedur - angefangen von der Reinheit der Lösemittel über die Probenvorbereitung bis hin zur verwendeten GPC-Säule.


MZ-Gel SD^{plus} LS ist ein von MZ-Analysentechnik entwickeltes Hochleistungs-Styrol-/Divinylbenzol-

Copolymer mit hohem Vernetzungsgrad. Das Material basiert auf **MZ-Gel SD^{plus}** das durch eine spezielle Nachbehandlung auf die Erfordernisse der Lichtstreuendetektion angepasst wird.

MZ-Gel SD^{plus} LS verfügt daher über ein extrem geringes Phasenbluten und weist von der Trennschärfe bis zum Arbeitsbereich die gleichen hervorragenden Eigenschaften auf wie das vielfach bewährte Basismaterial.

Molekulargewichtsbereiche & Ausschlussgrenzen

Porosität	Molekulargewichtsbereich	Ausschlussgrenze
50 Å	< 2.000	3.000
100 Å	< 3.000	5.000
500 Å	< 20.000	20.000
10e3 Å	1.000 - 40.000	70.000
10e4 Å	4.000 - 500.000	700.000
10e5 Å	10.000 - 2.000.000	4.000.000
10e6 Å	200.000 - 10.000.000	> 10.000.000
Linear	1.000 - 1.000.000	> 2.000.000

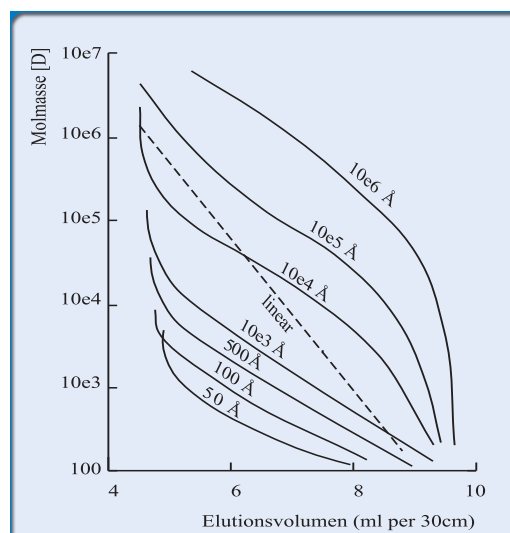

Technische Daten

MZ-Gel SD ^{plus} LS	3 µm	5 µm	10 µm
Teilchenform	sphärisch	sphärisch	sphärisch
Porosität [Å]	50-10 ³ Å	50-10 ⁶ Å und linear	50-10 ⁶ Å und linear
Bodenzahl: min. garantiert [m ⁻¹]	100.000	60.000	50.000
Bodenzahl: typischer Bereich [m ⁻¹]	120.000	80.000	60.000
Druckstabilität [bar]	160	160	160
Druck per 30 cm [bar]*	40	25	15
max. Fluss Analytisch 8 mm ID	1,5 ml/min	1,5 ml/min	3 ml/min
max. Fluss Narrow-bore 4,6 mm ID	0,6 ml/min	0,6 ml/min	0,6 ml/min
max. Fluss Präparativ 20 mm ID		10 ml/min	20 ml/min
Arbeitstemperatur	bis 100 °C	bis 100 °C	bis 140 °C

* Angabe bezieht sich auf Säule 300 x 8 mm, Fluß 1 ml/min, Eluens THF

MZ-Gel SD^{plus} LS - Preise und Bestellinformationen

Analytisch 8 mm ID			Preis/€	
Länge x ID	Korngröße	Porosität	Neu	Refill
300 x 8 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	1.206,--	1.097,--
	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.056,--	946,--
	5 µm	linear	1.148,--	1.039,--
	10 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	820,--	711,--
	10 µm	linear	935,--	826,--
600 x 8 mm	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.510,--	1.344,--
	5 µm	linear	1.734,--	1.570,--
	10 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	1.194,--	1.028,--
	10 µm	linear	1.354,--	1.188,--
50 x 8 mm	5 µm	alle Porositäten + linear	368,--	324,--
	10 µm	alle Porositäten + linear	368,--	324,--

Microbore				
250 x 3 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	720,--	610,--
40 x 3 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	269,--	215,--
250 x 2 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	720,--	610,--
40 x 2 mm	5 µm	alle Porositäten + Linear	269,--	215,--

Narrowbore 4,6 mm ID (sparen bis zu 70 % Lösungsmittel)				
300 x 4,6 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	1.210,--	1.100,--
	5 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å, 10 ⁴ Å, 10 ⁵ Å, 10 ⁶ Å	903,--	794,--
	5 µm	linear	996,--	886,--
40 x 4,6 mm	3 µm	50 Å, 100 Å, 500 Å, 10 ³ Å	269,--	215,--
	5 µm	alle Porositäten + Linear	269,--	215,--
	10 µm	alle Porositäten + Linear	269,--	215,--

Materialcodes MZ-Gel SD^{plus} LS

Porosität	3 µm	5 µm	10 µm
50	5554	5556	5531
100	5014	5016	5011
500	5054	5056	5051
1.000	5304	5306	5301
10 ⁴	-	5406	5401
10 ⁵	-	5506	5501
10 ⁶	-	5606	5601
Linear	-	5006	5001

i Bestellnummer

MZ

CODE

-

LEN

IDØ

4-stelliger
Materialcode

Länge
in mm

ID in
1/10 mm

Beispiel: MZ-Gel SD^{plus} LS linear 5 µm (5006);
 GPC-Säule 300 x 8,0 mm
 => **Best.-Nr.: MZ5006-300080**


Details zum Refill-Service auf Anfrage

GPC-Zubehör

Best.Nr.	Beschreibung	Menge	Preis/€
AS0301	Edelstahlkapillare AD 1/16" x 0,13 mm ID	3 m	125,--
AS0325	Edelstahlkapillare AD 1/16" x 0,25 mm ID	3 m	63,--
AS0350	Edelstahlkapillare AD 1/16" x 0,50 mm ID	3 m	63,--
AS0370	Edelstahlkapillare AD 1/16" x 0,75 mm ID	3 m	63,--
AS0310	Edelstahlkapillare AD 1/16" x 1,00 mm ID	3 m	56,--
AS1001	Edelstahlferrules 1/16"	10 Stück	28,--
AS1010	Edelstahlferrules 1/16"	100 Stück	213,--
AR1101	Edelstahlferrules 1/16" Rheodyne	10 Stück	28,--
AS2001	Fittingschrauben Edelstahl kurz	10 Stück	37,--
AS2101	Fittingschrauben Edelstahl lang	10 Stück	37,--
AS2201	Fittingschrauben Edelstahl extra lang	10 Stück	56,--
AS3001	Kupplung zöllig Edelstahl 1/16"	1 Stück	47,--
AS3101	T-Stück zöllig Edelstahl 1/16"	1 Stück	194,--
AS3201	Kreuz-Stück zöllig Edelstahl 1/16"	1 Stück	213,--
AP0313	PEEK-Kapillare AD 1/16" x 0,13 mm ID	3 m	60,--
AP0317	PEEK-Kapillare AD 1/16" x 0,17 mm ID	3 m	60,--
AP0325	PEEK-Kapillare AD 1/16" x 0,25 mm ID	3 m	60,--
AP0350	PEEK-Kapillare AD 1/16" x 0,50 mm ID	3 m	60,--
AP0375	PEEK-Kapillare AD 1/16" x 0,75 mm ID	3 m	60,--
AP5001	Fingertight-Fittings PEEK	10 Stück	59,--
AP5101	Säulenverbinder PEEK universal Fingertight	1 Stück	43,--
AP5201	Kupplung zöllig PEEK 1/16" (inkl. 2 Fingertight-fittings)	1 Set	37,--
AP5301	T-Stück zöllig PEEK 1/16" (inkl. 3 Fingertight-fittings)	1 Set	120,--
AP5401	Kreuzstück zöllig PEEK 1/16" (inkl. 4 Fingertight-fittings)	1 Set	135,--
AN5501	Blindverschraubung Nylon 1/16"	10 Stück	--,--
AN5510		100 Stück	--,--
AS6000	Kapillarschneidezange	1 Stück	--,--
AR6100	Rheotool	1 Stück	--,--
AP6200	Clean-Cut Schneidegerät für Kunststoffkapillaren	1 Stück	--,--
AP6300	Guillotine-Cutter	1 Stück	--,--
AC7000	Easy Flange-Kit	1 Set	--,--
AS7500	Last-drop Mobile Phase-Filter mit 2,0 µm Edelstahl-Fritte	1 Stück	--,--
AP7500	Last-drop Mobile Phase-Filter mit 2,5 µm PTFE-Fritte	1 Stück	--,--



Injektions-Spritzen

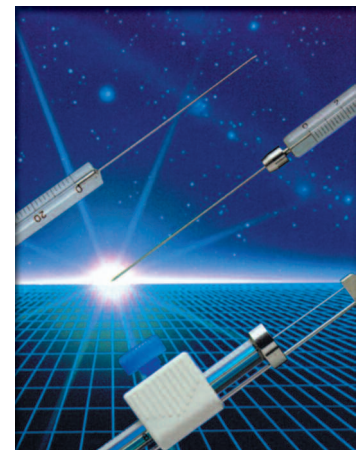

Exmire® GPC-Qualitätsspritzen

Volumen	kleinste Meßeinheit	Code	Preis/€
5 µl	0,1 µl	MSR 05	74,--
10 µl	0,2 µl	MSR 10	52,--
25 µl	0,5 µl	MSR 25	53,--
50 µl	1,0 µl	MSR 50	57,--
100 µl	2,0 µl	MSR 100	61,--
250 µl	5,0 µl	MSR 250	72,--
500 µl	10,0 µl	MSR 500	89,--

Liefer- und Zahlungsbedingungen: Ab € 500,-- Warenwert Lieferung frei Haus, bis € 499,-- Warenwert zzgl. Versandkosten. Alle Preisangaben zzgl. gesetzl. MwSt. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.